

# محتوى الكتيب

01 الجهاز التعويضي لسقف الحلق

02 تركيب الجهاز التعويضي

03 إزالة وتنظيف الجهاز التعويضي

04 لصقات الشفة والأنف

05 وضع لصقات الشفة

06 وضع لصقات الأنف

07 اللصقات للشفة المشقوقة من جهتين

08 إزالة اللصقات

08 مدة استخدام اللصقات

12-9 أمثلة لحالات

## دليل مرحلة

تشكيل الأنف والشفة  
لمعالجة الشفة المشقوقة  
وسقف الحلق

### إعداد:

د. أحمد قازلي  
د. ساره المزيبي  
د. معاذ العساف

# طريقة تركيب الجهاز التعويضي



امسح الباركود لمشاهدة  
فيديو توضيحي

- 1 اغسل يديك جيّدًا بالماء والصابون.
- 2 استعمل شاش لتنظيف وتنشيف الجهاز.
- 3 ضع قطعتين من المعجون اللاصق (الغراء).
- 4 أدخل الجهاز في فم الطفل من جهة اليمين أولاً ثم اليسار.
- 5 ابقى ماسكًا الجهاز لمدة 30 ثانية حتى ينشف الغراء.

## \* ملاحظات:

- الجهاز لا يسبب ألم للطفل، والبكاء بعد وضع الجهاز لأن الطفل غير معتاد عليه ومتضايق منه فقط.



المعجون اللاصق

# الجهاز التعويضي لسقف الحلق

## فوائد الجهاز التعويضي:

- 1 يساعد الطفل على الرضاعة.
- 2 يساعد على تشكيل العظم.

## مراحل عمل الجهاز التعويضي:

- 1 أخذ الطبعة (المقاس) من فم الطفل.
- 2 تجهيز الجهاز التعويضي في المعمل.
- 3 تسليم الجهاز في العيادة.



## لصقات الشفة والأنف

### فوائد لصقة الشفة والأنف:

2


#### لصقة الأنف:

تحفز نمو غضروف الأنف  
بالشكل الطبيعي.

1

#### لصقة الشفة:

تسهل العملية الجراحية  
وتقلل أثر الندوب.

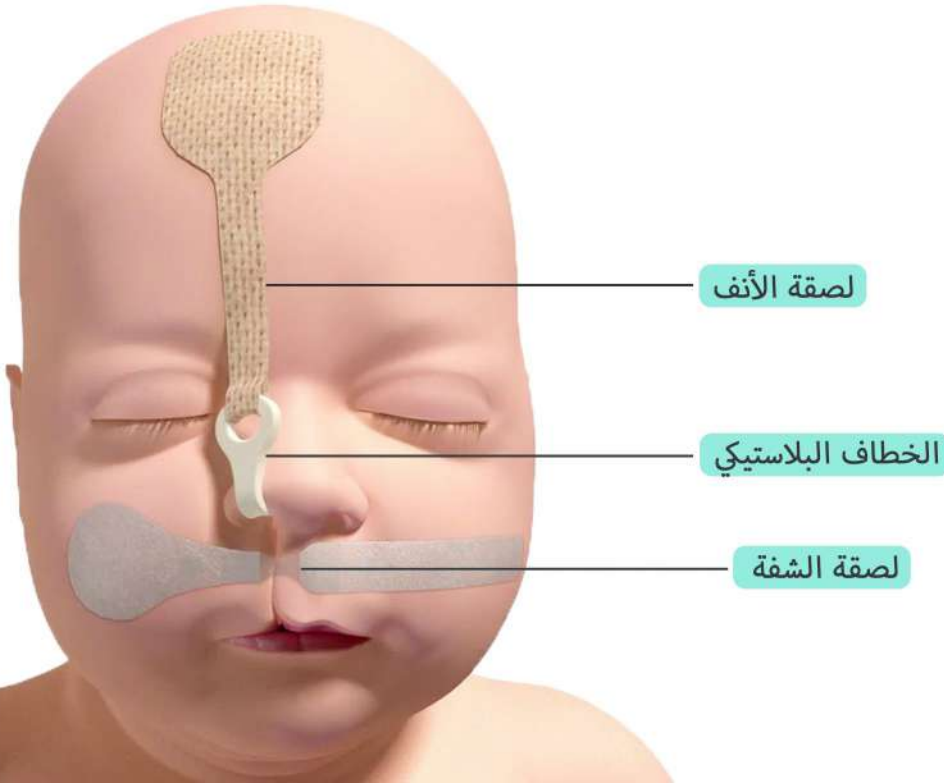

لصقة الأنف

الخطاف البلاستيكي

لصقة الشفة

## طريقة إزالة وتنظيف الجهاز التعويضي

1 اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.

2 بواسطة اصبع واحد، ادفع الجهاز إلى جهة الأسفل ثم اسحبه للخارج.

3 استعمل شاش مبلل بالماء ولفه على اصبعك لتنظيف لثة الطفل من بقايا الغراء، مع الابتعاد عن من منطقة الفراغ في الوسط.

4 اغسل الجهاز بصابون (فيرى).



امسح الباركود لمشاهدة  
فيديو توضيحي

### \* ملاحظات:

- كرر عملية تنظيف الجهاز مرة واحدة يوميًا.
- يجب فحص فم الطفل للتأكد من عدم وجود تقرحات أو جروح.

## طريقة وضع لصقات الأنف



- 1 ضع لصقة الحماية على الجبهة في عكس جهة الشفة المفتوحة.

- 2 حدد المسافة بين الأنف ولصقة الحماية.



- 3 ضع الخطاف البلاستيكي على الأنف، بحيث يكون مركزه على النقطة التي حددتها سابقاً.

- 5 إذا كان هناك لون أبيض يظهر في الأنف عند شد الخطاف، فهذا يعني أن شد الأنف مناسب.

- 4 شد الخطاف البلاستيكي برفق.

### \* ملاحظات:

- يجب أن يكون شد الأنف بسيطاً، بحيث لا يسبب أي ألم للطفل.
- يجب مراقبة الطفل أثناء ارتداء لصقات الأنف للتأكد من عدم وجود أي مشاكل.

## طريقة وضع لصقات الشفة



امسح الباركود لمشاهدة فيديو توضيحي

- 1 اغسل يديك جيداً بالماء والصابون.
- 2 ضع لصقات الحماية على الخدين، بحيث تكون الحواف الخارجية للاصقات على حافة الشفة الخارجية.
- 3 ضع لصقة الشفة على الجزء الأوسط من الشفة، بحيث تغطي الشق تماماً.
- 4 اضغط برفق على لصقة الشفة لتثبيتها في مكانها.

### \* ملاحظات:

- لا يجب إزالة لصقات الحماية إلا في حال اتساخها أو خروجها بعد عدة أيام.
- اللصقات لا تسبب ألم للطفل، والبكاء بعد وضع اللصقات لأن الطفل غير معتاد عليها ومتضايق منها فقط.



اللصقة تغطي الشق بالكامل



لصقات حماية على الخدين

## طريقة إزالة اللصقات

- 1 اغسل يديك جيّدًا بالماء والصابون.
- 2 ضع أصابعك تحت الحواف الخارجية للاصقات واضغط برفق لفكها.
- 3 إذا واجهت صعوبة في إزالة اللصقات، يمكنك استخدام شاش أو قطن مبلل لتسهيل فك اللصقات.

### \* مدة استخدام اللصقات:

تختلف مدة استخدام اللصقات حسب شدة الشق. عادةً ما يتم استخدام اللصقات لمدة 6-8 أسابيع، ولكن قد يوصي الطبيب بمدة أقصر أو أطول.

### \* ملاحظة:

في حال ظهور جروح أو تحسس على وجه الطفل أو في فم الطفل، يجب إزالة الجهاز أو اللصقات ومراجعة الطبيب.

## اللصقات للشفة المشقوقة من جهتين

- 1 لصقة الشفة: ضع اللصقة بحيث تغطي الشقين تمامًا.
- 2 لصقة الأنف: ضع لصقتين حماية على الجبهة واسحب الخطاف البلاستيكي في عكس اتجاه الشق.



1 اللصقة تغطي الشقين تمامًا.

2 لصقتين على الجبهة.

## أمثلة لحالات



بعد العملية



بعد الولادة



بعد العملية



بعد الولادة

## أمثلة لحالات



بعد وضع اللصقات



بعد الولادة



بعد العملية

## أمثلة لحالات



بعد وضع اللصقات



بعد الولادة



بعد العملية

## أمثلة لحالات



بعد أسبوع من وضع اللصقات  
(يمكن ملاحظة ارتفاع الأنف)



قبل وضع اللصقات



بعد شهرين من وضع اللصقات



وضع اللصقات خلال الأسبوع الأول